




elleboog

PICC-lijn

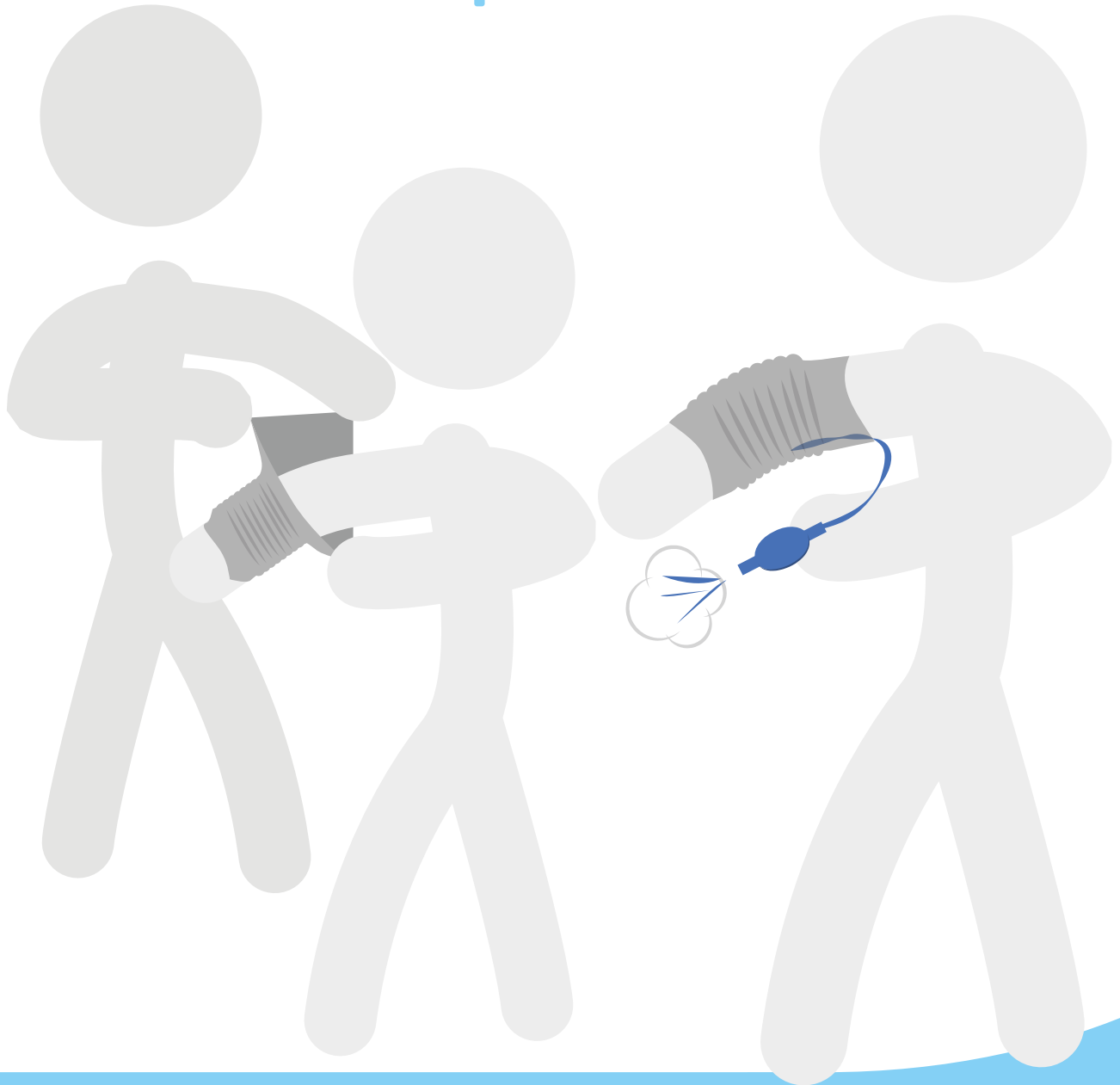

Hoe breng je de Happy2Splash beschermhoes aan?



1. Rek de beschermhoes aan bovenkant uit en trek hem aan tot boven het gips. Zorg dat de hoes aan de bovenkant glad/netjes om de huid zit.
2. Steek het slangetje van de pomp tussen de huid en de hoes om deze vacuüm te kunnen pompen.



3. Pomp nu de lucht uit de zwemhoes. Het pompje stopt vanzelf als alle lucht is verwijderd,
4. Je kan het slangetje nu uit de hoes trekken, veel zwemplezier



elleboog

PICC-lijn

Handleiding Maattabel :

- Omtrek: Meet de onderarm en bovenarm

Het is geen probleem als de zwemhoes langer is dan het gips. De zwemhoes blijft zijn functie behouden en zal door het vacuüm strak aansluiten om de arm of het been.




Happy2Splash / MyMitella
 Industrierweg-Stolwijk-2821AL
 NL – Tel: +31(0) 182 78 79 37
 Email: info@happy2splash.nl

happy2splash.nl

elleboog	maat	omtrek (cm) boven arm	omtrek (cm) onder arm
	xs	16 - 19	13 - 16
	s	19 - 22	16 - 20
	m	22 - 26	18,5 - 22,5
	l	26 - 31	20 - 24
	xl	31 - 36	23 - 27
	xxl	36 - 41	26 - 30
	xxxl	41 - 46	29 - 33



been

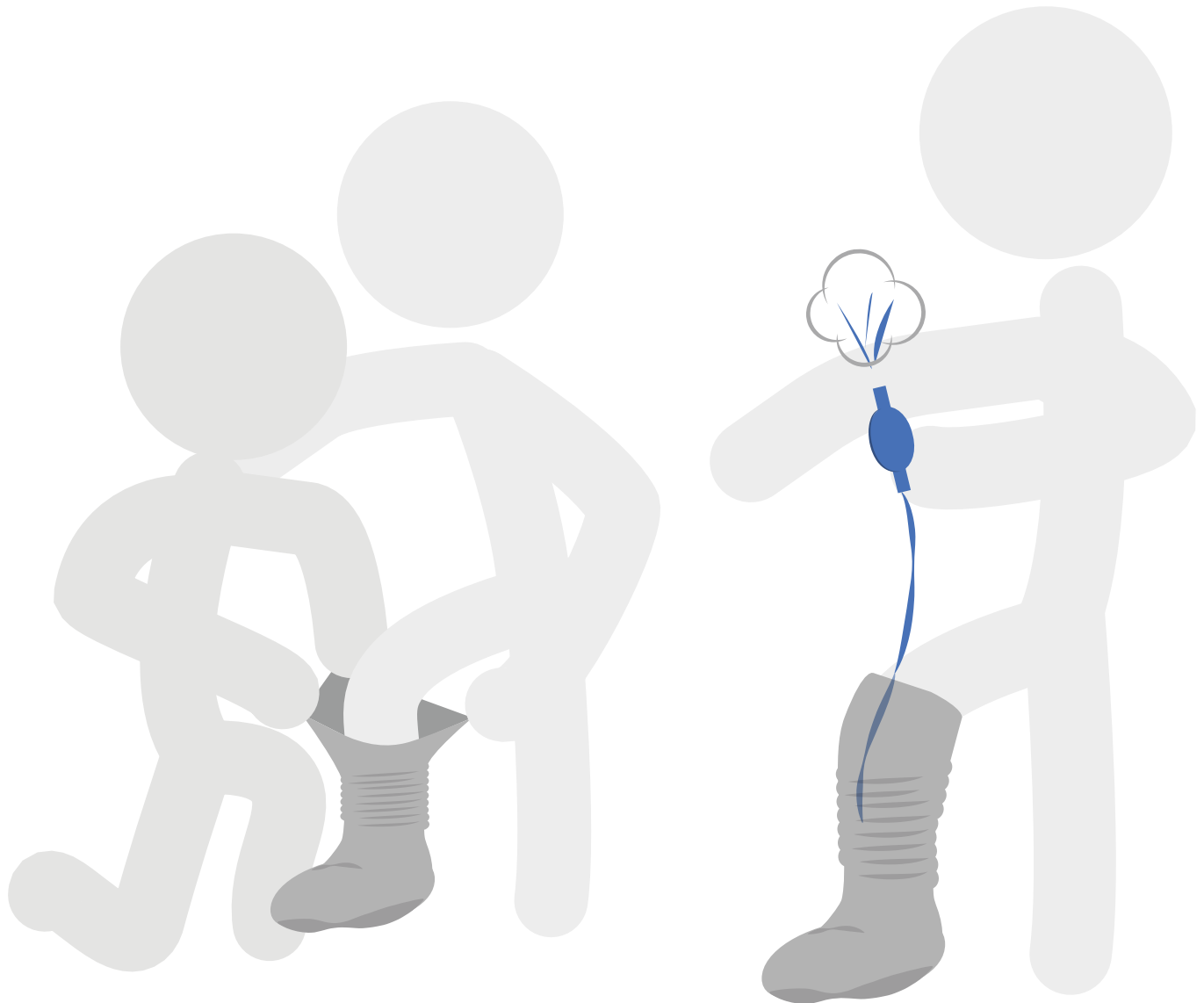

Hoe breng je de Happy2Splash beschermhoes aan?



1. Rek de beschermhoes aan bovenkant uit en trek hem aan tot boven het gips. Zorg dat de hoes aan de bovenkant glad/netjes om de huid zit.
2. Steek het slangetje van de pomp tussen de huid en de hoes om deze vacuüm te kunnen pompen.



3. Pomp nu de lucht uit de zwemhoes. Het pompje stopt vanzelf als alle lucht is verwijderd,
4. Je kan het slangetje nu uit de hoes trekken, veel zwemplezier



Happy2Splash



been

Handleiding Maattabel :

- Omtrek: Meet de omtrek van het been 2,5 cm boven het gipsverband
- Lengte: Meet de beenlengte vanaf de hiel tot minimaal 2,5 cm boven het gipsverband

Het is geen probleem als de zwemhoes langer is dan het gips. De zwemhoes blijft zijn functie behouden en zal door het vacuüm strak aansluiten om de arm of het been.



Happy2Splash / MyMitella
Industrieweg-Stolwijk-2821AL
NL – Tel: +31(0) 182 78 79 37
Email: info@happy2splash.nl

happy2splash.nl

been	maat	omtrek (cm)	lengte (cm)
	xs	27,5 - 32,5	56 ± 1
	s	32,5 - 38,5	59 ± 1
	m	38,5 - 43,5	66 ± 1
	l	43,5 - 48,5	67 ± 1
	xl	48,5 - 53,5	68 ± 1

Copyright by 2020




©





arm

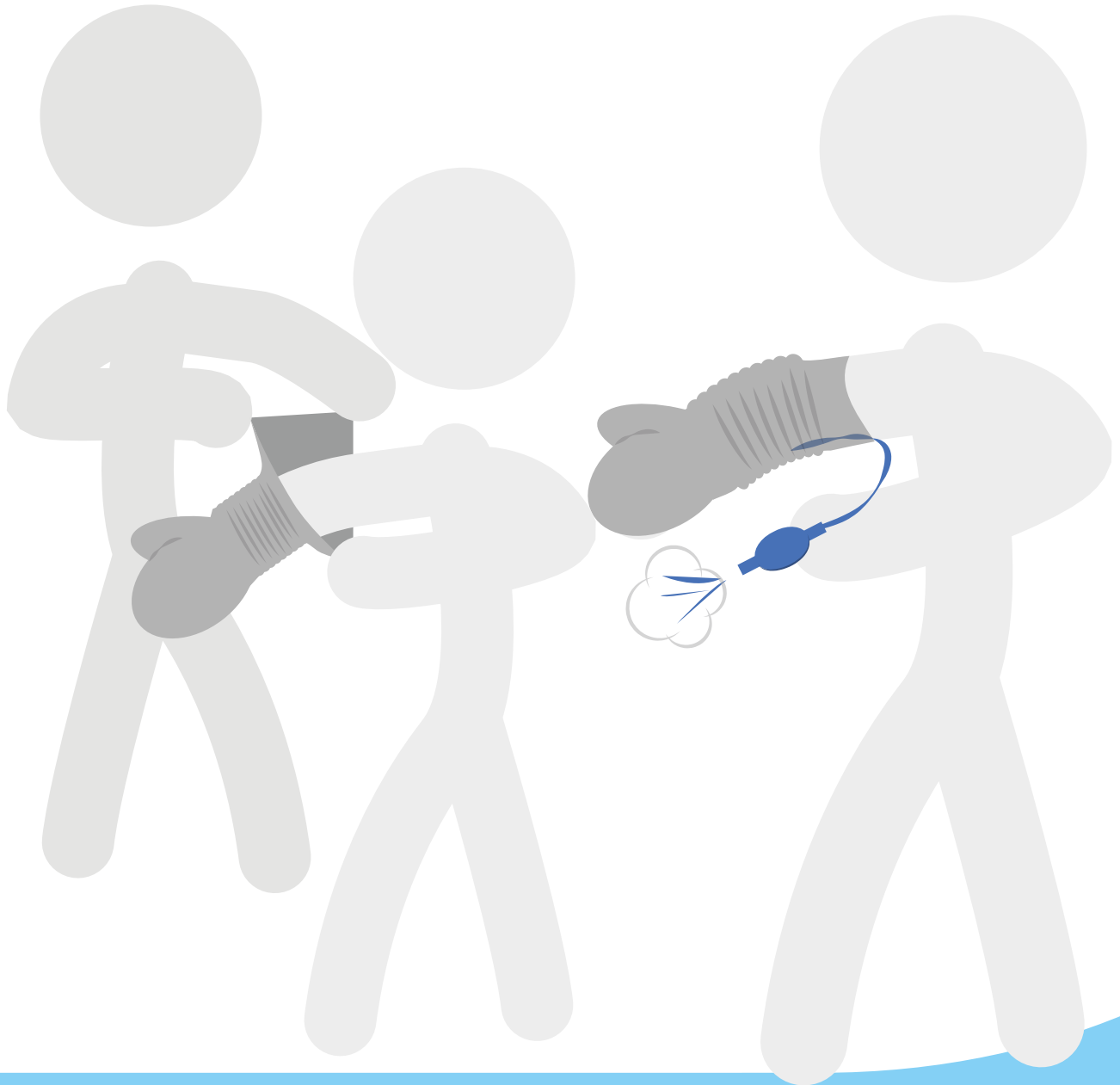

Hoe breng je de Happy2Splash beschermhoes aan?



1. Rek de beschermhoes aan bovenkant uit en trek hem aan tot boven het gips. Zorg dat de hoes aan de bovenkant glad/netjes om de huid zit.
2. Steek het slangetje van de pomp tussen de huid en de hoes om deze vacuüm te kunnen pompen.



3. Pomp nu de lucht uit de zwemhoes. Het pompje stopt vanzelf als alle lucht is verwijderd,
4. Je kan het slangetje nu uit de hoes trekken, veel zwemplezier



Happy2Splash



arm

Handleiding Maattabel :

- Omtrek: Meet de omtrek van het been 2,5 cm boven het gipsverband
- Lengte: Meet de beenlengte vanaf de hiel tot minimaal 2,5 cm boven het gipsverband

Het is geen probleem als de zwemhoes langer is dan het gips. De zwemhoes blijft zijn functie behouden en zal door het vacuüm strak aansluiten om de arm of het been.



Happy2Splash / MyMitella
Industrieweg-Stolwijk-2821AL
NL – Tel: +31(0) 182 78 79 37
Email: info@happy2splash.nl

happy2splash.nl

arm	maat	omtrek (cm)	lengte (cm)
	xs	16 - 19,5	48 ± 1
	s	19,5 - 24,7	49 ± 1
	m	24,7 - 30	50 ± 1
	l	30 - 34	56 ± 1
	xl	34 - 38	59 ± 1
	xxl	38 - 42	66 ± 1

Copyright by 2020

